



# Moderma Flex

## Sistema monopezzo per stomia

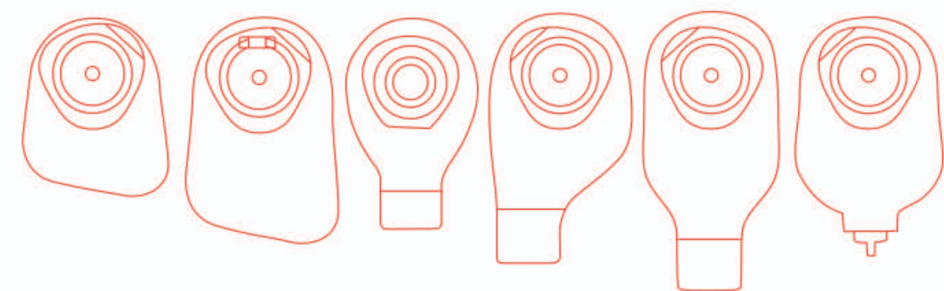

## Flessibile e sicuro

Il sistema Moderma Flex è morbido e discreto, con opzioni specifiche per rispondere ad ogni necessità, unendo comfort, praticità e sicurezza.

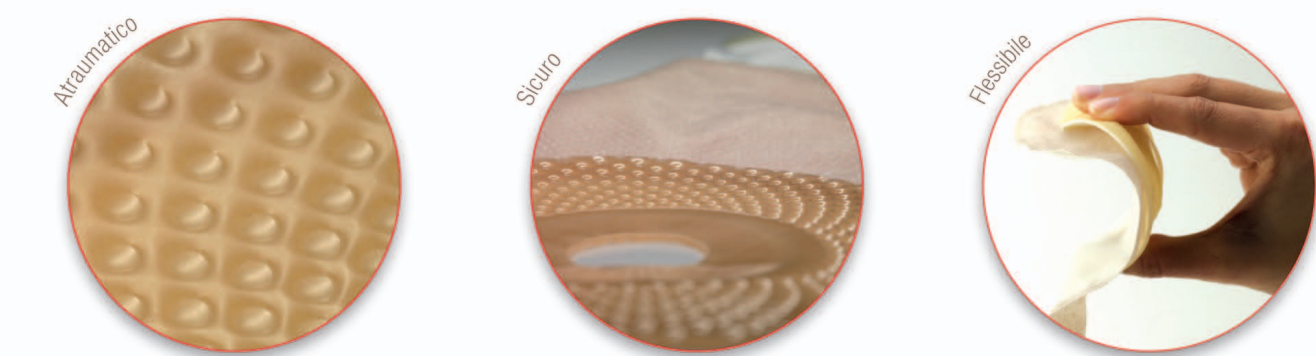

Il sistema per stomia Moderma Flex è caratterizzato da placche morbide e sottili, con microalveoli che assicurano protezione attiva della cute e rimozione atraumatica. Le sacche sono realizzate in uno speciale materiale anti-fruscio, tutte con il lato corpo rivestito in delicato tessuto per un tocco confortevole sulla pelle

### Sacche Chiuse

Con il filtro AF300 che evita perdite e rigonfiamento.

### Sacche Aperte

La chiusura Lock'nRoll Microseal garantisce sicurezza, discrezione e comfort all'utilizzatore

### Sacche Urostomia

Con l'esclusivo scarico di sicurezza, igienico e pratico, con tappino extra a prova di goccia.

### Comfort

- Idrocolloide SoftFlex: protezione totale della pelle
- Idrocolloide FlexTend: assorbenza e durata in uso
- Bordo adesivo: adesione immediata e sicura

### Facilità d'uso e discrezione

- Pochi gesti per preparare e indossare la sacca
- Film anti odore e anti rumore
- Filtro AF300
- Drenaggio rapido, igienico, facile

### Sicurezza

- Convessità integrale per colo, ileo, uro
- Hollister CushionFit per una confortevole aderenza
- Flangia integrata per l'aggancio della cintura

### Scelta di placche

- Placca a losanga per ottimizzare comfort e sicurezza
- Placca ovale per stomie complesse e necessità cliniche speciali
- Placca con adesivo

# Moderma Flex

## Sistema monopezzo per stomia

Colore	Ø Foro	Articolo
<b>Sacche Chiuse per Colostomia</b> Cod. CND A100101		
Midi 550 ml		
Trasparente	15-55 mm	22500
Opaca	15-55 mm	22100
	25 mm	22125
	30 mm	22130
	35 mm	22135
	40 mm	22140
	45 mm	22145

Confezione da 30 pezzi  
Codice ISO 09.18.04.003

Colore	Ø Foro	Articolo
<b>Maxi 700 ml</b>		
Trasparente	15-55 mm	22400
Opaca	15-55 mm	22300

Confezione da 30 pezzi  
Codice ISO 09.18.04.003

Colore	Ø Foro	Articolo
<b>Maxi Oval 700 ml</b>		
Trasparente	15-75 mm	22401
Opaca	15-75 mm	22301

Confezione da 30 pezzi  
Codice ISO 09.18.04.003

Colore	Ø Foro	Articolo
<b>Sacche convesse Chiuse per Colostomia</b> Cod. CND A100101		
Maxi 700 ml		
Trasparente	15-51 mm	22901
Opaca	15-51 mm	22801

Confezione da 30 pezzi  
Codice ISO 09.18.04.009

Colore	Ø Foro	Articolo
<b>Sacche Aperte per Ileostomia</b> Cod. CND A100102		
Mini con Lock 'n Roll Microseal 350 ml		
Opaca	15-55 mm	28100

Confezione da 30 pezzi  
Codice ISO 09.18.04.006

Colore	Ø Foro	Articolo
<b>Mini con Lock 'n Roll Microseal 350 ml</b>		
Trasparente	15-55 mm	28500
Opaca	15-55 mm	28200
	20 mm	28220
	25 mm	28225
	30 mm	28230
	35 mm	28235
	40 mm	28240

Confezione da 30 pezzi  
Codice ISO 09.18.04.006

Colore	Ø Foro	Articolo
<b>Midi con ciamp 575 ml</b>		
Trasparente	15-55 mm	26500
Opaca	15-55 mm	26200

Confezione da 30 pezzi  
+ 6 morsetti  
Codice ISO 09.18.04.006

Colore	Ø Foro	Articolo
<b>Maxi Oval con Lock 'n Roll Microseal 780 ml</b>		
Trasparente	15-75 mm	28401
Opaca	15-75 mm	28301

Confezione da 30 pezzi  
Codice ISO 09.18.04.006

Colore	Ø Foro	Articolo
<b>Sacche convesse Aperte per Ileostomia</b> Cod. CND A100102		
Maxi con Lock 'n Roll Microseal 780 ml		
Trasparente	15-51 mm	26901
Opaca	15-51 mm	26801

Confezione da 30 pezzi  
Codice ISO 09.18.04.009

Colore	Ø Foro	Articolo
<b>Sacche per Urostomia</b> Cod. CND A100103		
350 ml		
Trasparente	15-55 mm	29500
Opaca	15-55 mm	29100
	20 mm	29120
	25 mm	29125
	30 mm	29130
	35 mm	29135

Confezione da 10 pezzi + 10 tappini esterni di sicurezza  
+ 1 adattatore per sacche raccolta urina  
Codice ISO 09.18.07.003

Colore	Ø Foro	Articolo
<b>Sacche per Urostomia con adesivo</b> Cod. CND A100103		
350 ml		
Trasparente	15-64 mm	29400
	20 mm	29420
	25 mm	29425
	30 mm	29430
	35 mm	29435
Opaca	15-64 mm	29000

Confezione da 10 pezzi + 10 tappini esterni di sicurezza  
+ 1 adattatore per sacche raccolta urina  
Codice ISO 09.18.07.003

Colore	Ø Foro	Articolo
<b>Sacche convesse per Urostomia</b> Cod. CND A100103		
350 ml		
Trasparente	15-51 mm	29301
	20 mm	29320
	25 mm	29325
	30 mm	29330
	35 mm	29335
Opaca	15-51 mm	29201

Confezione da 10 pezzi + 10 tappini esterni di sicurezza  
+ 1 adattatore per sacche raccolta urina  
Codice ISO 09.18.07.006

Colore	Ø Foro	Articolo
<b>Sacche con bordo adesivo per Urostomia</b> Cod. CND A100103		
350 ml		
Trasparente	15-25 mm	29700
	20 mm	29720
	25 mm	29725
	30 mm	29730
	35 mm	29735
Opaca	15-25 mm	29600

Confezione da 10 pezzi + 10 tappini esterni di sicurezza  
+ 1 adattatore per sacche raccolta urina  
Codice ISO 09.18.07.006

Per informazioni Numero Verde 800-836088  
Telefonata gratuita - Servizio attivo dal lunedì  
al venerdì dalle 9.30 alle 17.00

**CE** Hollister e logo, Moderma Flex, AF300, SoftFlex, FlexTend, CushionFit e Lock 'n Roll Microseal sono marchi registrati da Hollister Incorporated.  
©2014 Hollister Incorporated.



**Hollister SpA**  
Strada 4 Palazzo A/7  
20090 Milanofiori - Assago  
Tel. 02.8228181  
Fax 02.82281877  
servizio.pazienti@hollister.com  
[www.hollister.it](http://www.hollister.it)

Riservato esclusivamente agli operatori sanitari del settore



**Hollister**

ITH003




**Moderma Flex**  
Sistema monopezzo per stomia




# Moderma Flex

Sistema monopezzo per stomia

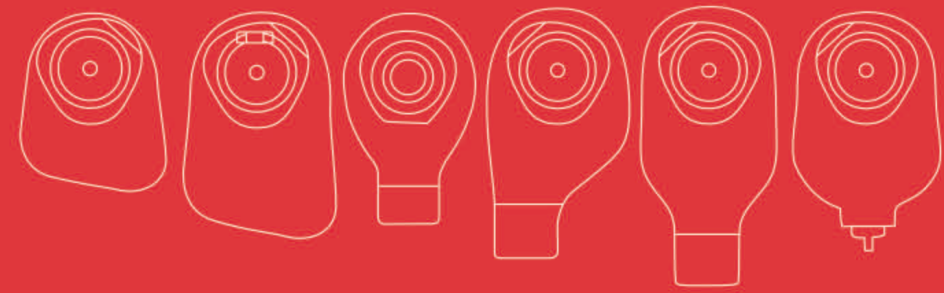

## Sicurezza e comfort, senza compromessi

Hollister offre una serie di soluzioni altamente funzionali per contribuire a migliorare la qualità della vita delle persone con una stomia. Il nostro ricco assortimento risponde al meglio ad ogni necessità.

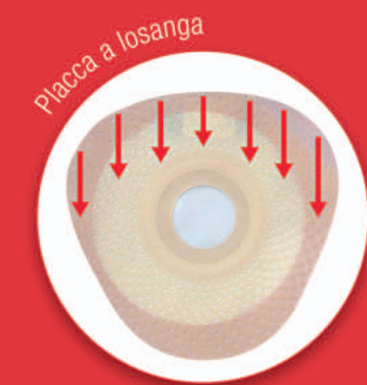

### Placca a losanga

Comfort e protezione della cute

- Forma e spessore della placca garantiscono flessibilità e indossabilità
- Idrocolloide SoftFlex delicato sulla pelle
- Durata in uso normale



### Convex

Specifica per la retrazione

- Alta resistenza agli escreti: perfetta tenuta e lunga durata in uso
- Si adatta al profilo addominale per il massimo comfort
- Mantiene integra la cute



### Placca Oval

Necessità cliniche speciali

- Idrocolloide SoftFlex delicato sulla pelle
- Le ampie dimensioni garantiscono sicurezza e adattabilità
- Ritagliabile fino a 75 mm



### Placca con Bordo Adesivo

Resistenza e flessibilità

- Specifica per Urostomia
- Idrocolloide Flexend resiste all'erosione e mantiene la forma anche in presenza di fluidi
- Durata in uso extra


# Lock 'n Roll

Chiusura con Microseal

## La sicurezza è semplice

La chiusura integrata Lock 'n Roll Microseal contiene migliaia e migliaia di micro sigilli autobloccanti. Premendoli, le barrette di chiusura aderiscono perfettamente tra loro. Tecnologia esclusiva - massima resistenza all'acqua e alla pressione garantita!

L'aletta di sicurezza trasparente è facile da aprire e chiudere, e permette di controllare la chiusura.

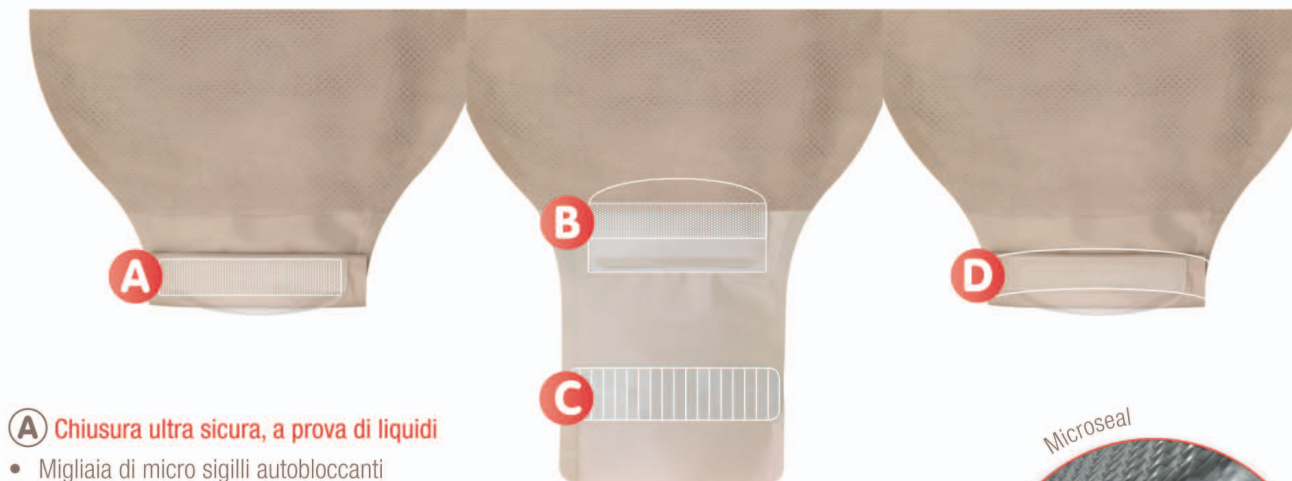

### A Chiusura ultra sicura, a prova di liquidi


- Migliaia di micro sigilli autobloccanti
- Sicurezza provata contro liquidi, pressione, trazione accidentale

### B C Aletta di sicurezza e rinforzi flessibili - NUOVI

- L'aletta di sicurezza non interferisce con svuotamento e pulizia
- I rinforzi flessibili permettono di controllare il flusso e facilitano la pulizia


### D Disegno anatomico

- Confortevole: segue la forma del corpo
- Le dimensioni dei Microseal assicurano massima efficacia in un profilo ultrasottile

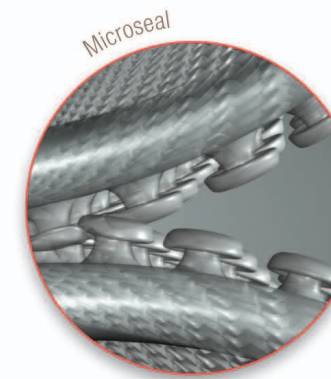

### Aprire

Basta aprire l'aletta per sbloccare la chiusura con Microseal, supersicura e silenziosa!

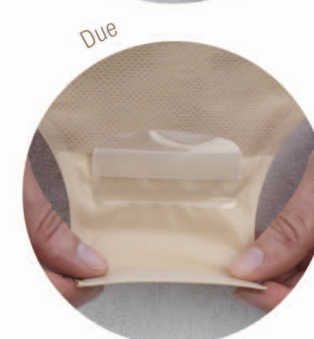

### Svuotare

Svuotare la parte inferiore della sacca: i rinforzi flessibili assicurano il controllo del flusso. Premere sulle estremità laterali per rilasciare il contenuto.



### Pulire

Aprire l'apertura premendo sulle estremità laterali: i rinforzi flessibili facilitano la pulizia.



### Chiudere


Arrotolare, premere la chiusura tra il pollice e le dita, dal centro ai bordi, per bloccare la chiusura con Microseal.

# AF300

Filtro

## Una generazione più avanti


Veloce ed efficace grazie all'ampia superficie attiva filtrante: niente più rigonfiamenti ed odori. Protezione attiva contro i liquidi garantita da doppia membrana di sicurezza interna ed esterna.

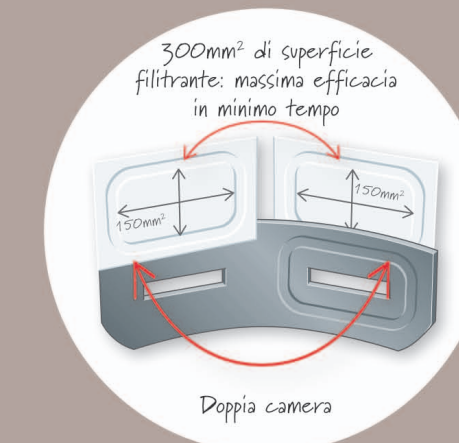


Veloce




Uscita con membrana di protezione  
Depurazione a carbone attivo  
Ingresso con membrana di protezione

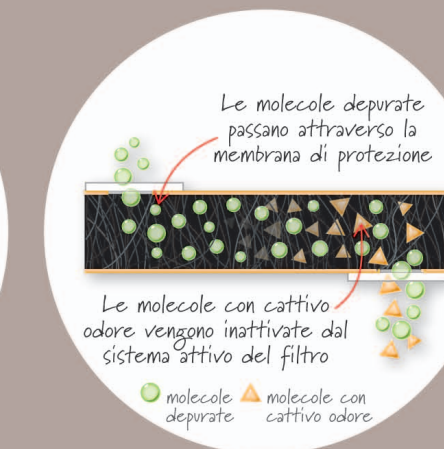

Niente odori

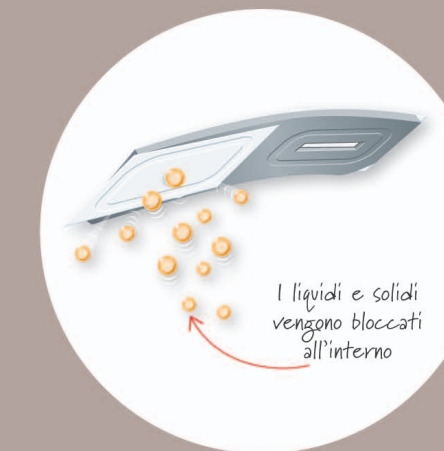

I liquidi e solidi vengono bloccati all'interno

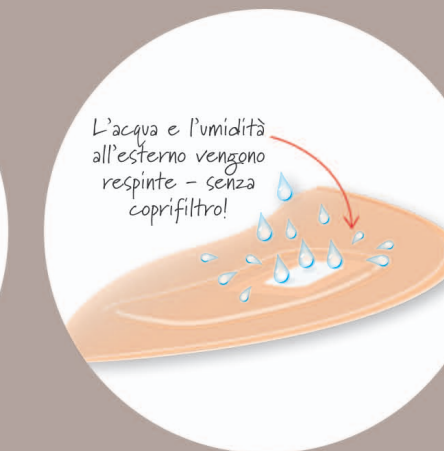

Protezione attiva